

# Kit de RT-PCR SARS-CoV-2 (FLU + RSV)

## Diagnóstico Molecular

Registro: 10355870406



Otimize a demanda de seu laboratório com maior praticidade e rapidez, reduzindo o desperdício de reagentes.

**até 96 ensaios em uma mesma corrida**




\* solicite o protocolo do kit



# Kit para detectar SARS-CoV-2.

Prático e acessível, o kit VIASURE CFR possui material liofilizado, pronto para uso, com todos os reagentes já dentro dos tubos de análise da PCR: primers, enzimas, dNPTs, sondas, controle interno endógeno. Necessário apenas 2 pipetagens no tubo de PCR:


- 1. Adicionar o tampão de reidratação
- 2. Adicionar amostra de RNA extraído

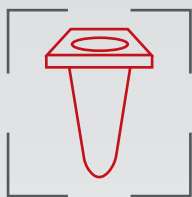

Kit pronto, **liofilizado**, com todos os reagentes necessários




Compatibilidade com mais de **40 modelos** de termocicladores

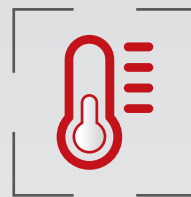

**Armazenamento e transporte** em temperatura ambiente



**Multiplex**, detecta e identifica SARS, FLU, RSV

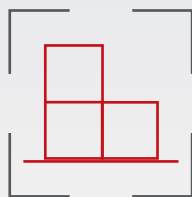

Validade de **24 meses**



**Baixo custo** por teste, **96 ensaios** por corrida

**Multiplex:** detecta e identifica SARS-CoV-2, FLU & RSV....

**Descrição:** kit de PCR em tempo real One-Step Multiplex para a detecção qualitativa de SARS-COV-2, Influenza A/B & RSV (A/B) em amostras respiratórias. Possui controle interno endógeno (alvo: gene da RNase P). Material liofilizado e pronto para uso. Possui controle positivo e negativo.

**Formato do kit:** 12 tiras x 8 poços, 1 placa com 96 poços, 4 x tubo de 2 mL.